

Kit Manteniment Motlles

- Kit de neteja per a motlles compost per recipient, 8 pastilles de neteja, 1 pot de gel netejador i pera d'aire.



Kit Manteniment Intras amb Esprai

- Kit de neteja i assecat dissenyat per a audiòfons intracanalals. Compost per 1 esprai amb raspall (30ml), 2 parells de càpsules assecants i un got d'assecar.



Kit Manteniment Intras amb Tovallolletes

- Kit de neteja i assecat dissenyat per a audiòfons intracanalals. Compost per 25 tovallolletes de neteja, 2 parells de càpsules assecants i un got d'assecar.



RECANVI PASTILLES NETEJA

- Recanvi de pastilles netejadores amb oxigen actiu
- Contingut: 5 pastilles



PASTILLES ASSECANTS

- Pastilles assecants, amb gel de silici, per a l'assecat òptim d'audiòfons i motlles.
- Contingut: caixa 5 unitats.



Pera Aire Cedis

- Pera bufadora, per a eliminar restes de líquid al tub del motlle adaptador



Esprai Cedis amb Raspall

- Esprai per a la neteja i desinfecció d'audiòfons intracanalals i motlles.
- Bactericida, fungicida y hepatovincida
- Sense aerosol
- 30 ml



Recanvi Esprai Neteja

- Recanvi per a esprai de neteja Cedis



Esprai Cedis Vaporitzador

- Esprai de neteja Cedis amb vaporitzador



Got d'assecar Cedis

- Got d'assecar per a l'assecat d'audiòfons i motlles



Got de Neteja Cedis

- Got de neteja amb reixeta inserida per a la neteja de motlles adaptadors



SUPER DRI - AID

- Deshumectador superpotent
- N'hi ha prou amb dipositar a la nit l'audiòfon sobre l'esponja que el separa dels grànuls higroscòpics i tancar hermèticament. Un cop saturats, els grànuls es poden regenerar al microones, seguint les instruccions.



AMPLIFICADOR TELÈFON

- Multiplica el nivell de so més de 10 cops
- Èmfasi en freqüències agudes
- És compatible amb la bobina telefònica



SHAKE-AWAKE

- Despertador - Vibrador
- Ideal per a persones sordes, per a posar-lo sota el coixí, la vibració fa despertar
- També té alarma de so
- És un rellotge digital amb llum



TELÈFON MIRAFONE

- Telèfon especial per a persones amb problemes auditius
- Vibrador ossi
- Altaveu mans lliures
- Volum regulable
- Timbre visual
- Repetició de la trucada
- Trucada en espera




VIBRALITE 2

- Alarma por vibració
- Alarma amb so
- Il·luminació en pantalla
- Opció auto-il·luminació.
(s'il·lumina al decantar el canell)
- Segon rellotge
- Dues Alarmes
- Temporitzador amb compte enrere
- Opció alerta horària
- 12 –24 hores
- Cronòmetre



TRANSMISSOR PORTA BELLMAN

- Transmet la senyal als receptors de la família Visit, avisant a l'usuari quan truquen al timbre de la porta.
- **Funció**
Activat pel timbre de la porta, mecànic o elèctric, o bé pel porter automàtic.
Muntatge
Al costat de la paret amb Velcro o cargol. El triangle vermell ha d'estar el més a prop possible del timbre.
- **Ajustaments**
Canvi de canal i selecció d'advertència als receptors Visit.
Pila
1 pila de 9V, duració 3-10 anys.
Tipus receptor i abast
- Per ràdio.
Abast mínim
30 mts. (interior vivenda)/ 100 mts. a exteriors

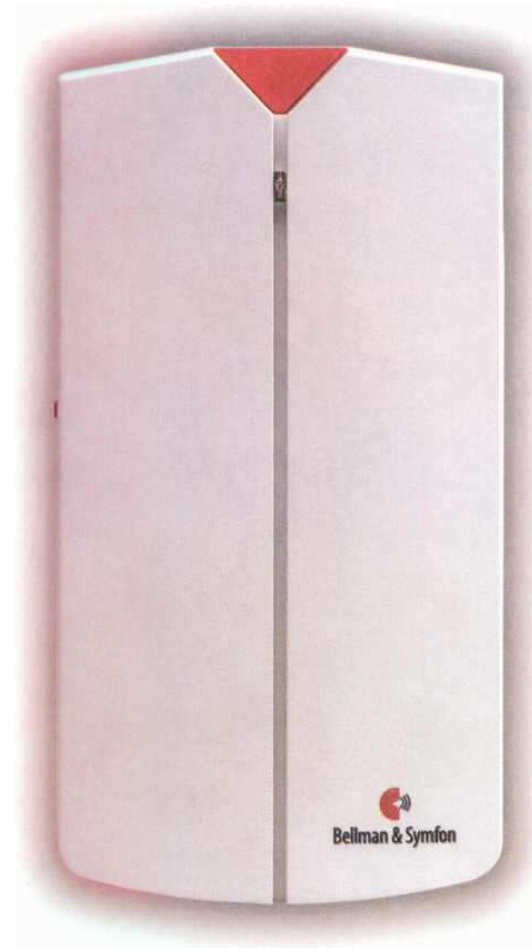

TRANSMISSOR TELÈFON BELLMAN

- Transmet el senyal del timbre del telèfon als receptors de la família Visit, avisant a l'usuari quan es produeix una trucada.
- **Funció**
Activat per els senyals telefònics entrants.
Incorpora adaptador doble per a connectar a una presa telefònica de la paret. També pot utilitzar-se com a timbre de porta o acoblar-se a la instal·lació elèctrica.
Muntatge
A paret al costat del telèfon, amb velcro o cargol.
Ajustaments
Canvi de canal i selecció d'advertències als receptors Visit.
Pila
1 pila de 9V, duració 3-10 anys.
Tipus receptor i abast
Per ràdio.
Abast mínim
30 mts. (interior vivenda)/ 100 mts. a exteriors.



BABY CRY BELLMAN

- Transmet el senyal als receptors de la família Visit, avisant a l'usuari en cas de que el bebè plori.

Funció

Activat pel so del plor del bebè. Poden seleccionar-se 3 posicions per a escollir la intensitat del so en la que l'usuari desitja ser avisat.

Muntatge

A prop del bressol, a la paret o a sobre d'una taula, amb el micròfon dirigit cap al bebè.

Ajustaments

Canvio de canal i selecció d'advertència als receptors Visit.

Pila

2 piles LR14

Tipus receptor i abast

Per ràdio.

Abast mínim

30 mts. (interior vivenda)/ 100 mts. a exteriors.



CARREGADOR PER A RECEPTOR BUTXACA BELLMAN

- S'utilitza per a carregar el receptor de butxaca Visit quan es prefereixi utilitzar una pila recarregable. Al carregador s'hi poden acoblar 1 o 2 vibradores de coixí.

Funció

Carrega el receptor de butxaca vibrotàctil quan s'utilitza amb pila recarregable. Al carregador s'hi poden acoblar 1 o 2 vibradors de coixí.

Muntatge

Es penja a la paret o es col·loca a la tauleta de nit.

Duració de la càrrega

14 dies, encara que es recomana carregar la pila cada nit.

Pes

250 grs. Adaptador inclòs. S'inclou també pila recarregable de 1,2 V.



RECEPTOR DE BUTXACA BELLMAN

- Funciona amb els transmissors Visit i indica amb diferents tipus de vibració i llum, les trucades telefòniques o al timbre de la porta. Per a pèrdues auditives superiors a 55 dB o persones que es desplacen contínuament

Funció

Rep els senyals dels transmissors del sistema Visit i els mostra clarament amb llum i vibració

Muntatge

Es porta a la butxaca o es fixa amb una pinça, p.ex., al cinturó.

Ajustaments

Canvi de ràdiocanal.

Pila

1 pila recarregable de 1,2 V (es subministra amb el carregador duració 2 setmanes, o 1 pila alcalina LR03, un mes de duració.

Varios

-80 grs. de pes



RECEPTOR PORTÀTIL BELLMAN

- Es pot utilitzar amb els transmissors de la família Visit, avisant a l'usuari quan truquen a la seva porta o el truquen per telèfon. Recomanat per a pèrdues auditives inferiors a 55 dB.

-

Funció

Rep els senyals dels transmissors del sistema Visit i els mostra amb senyals sonors i lluminosos.

Muntatge

Portàtil.

Ajustaments

Volum fàcilment ajustable. Es pot desconnectar l'avís lluminós.


Pila

4 piles de 1,5 V(LR14). Duració: 2 o 3 anys. També amb adaptador de xarxa.

Tipus receptor i abast

Ràdio. Abast mínim: 30 m. a l'interior de la vivenda, 100 m. a exteriors.

Varis Intensitat màx. 90 dB. Freqüència: 500-700Hz. Recomanable per a pèrdues auditives inferiors a 55 dB

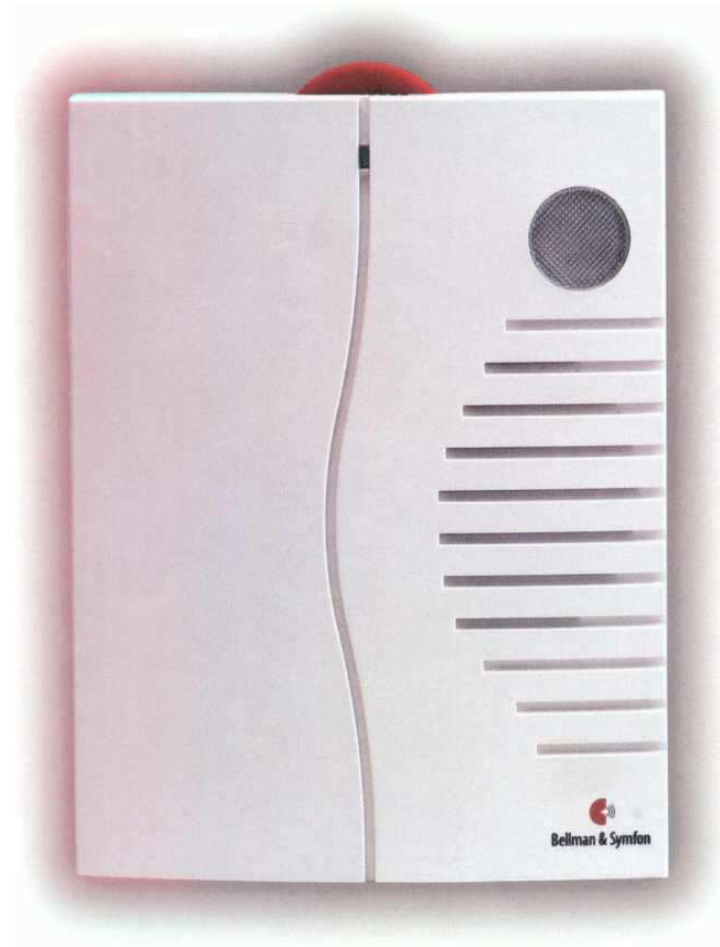

VIBRADOR PER A COIXÍ BELLMAN

- S'utilitza en combinació amb altres accessoris Visit* i avisa a l'usuari per vibració mentre està dormint. *Receptor portàtil, receptor vibrotàctil i despertador

Funció


Desperta amb vibracions quan està connectat al receptor portàtil o al receptor de butxaca vibrotàctil Bellman Visit. També es pot utilitzar amb el despertador Bellman.

Muntatge

Es connecta a la presa indicada del receptor portàtil o al carregador Visit.

Pila

No és necessària.

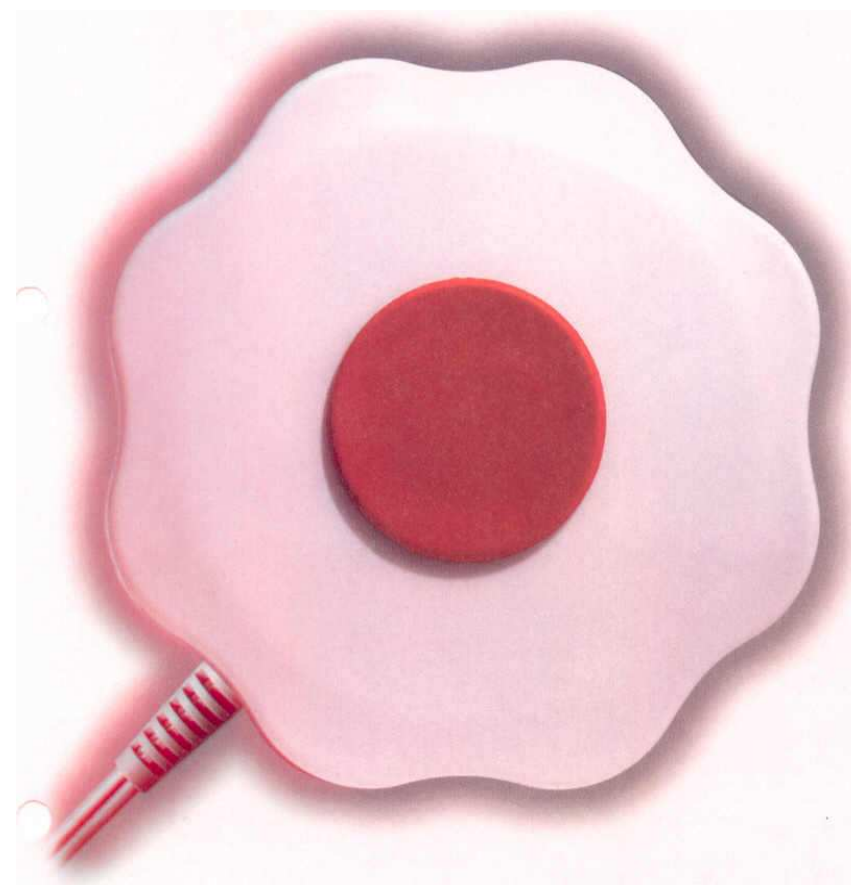

AMPLIFICADOR PER A TELEVISOR SENNHEISER

- Sistemes infrarojos per a l'escolta directa d'àudio i televisió. Disponibles en Mono o Estèreo.
- Control de volum independent del televisor
- Sense cables
- Bateria recarregable
- Excel·lent qualitat de so



AQUA-EARBAND

- Fabricat en neoprè d'alta qualitat
- Protecció per a les orelles contra l'aigua i el fred
- Reversible i disponible en tres mides
- Ajustable mitjançant velcro



PROTECTOR PER A AUDIÒFONS RETROAURICULARS

- Mànigues protectores per als seus audiòfons retroauriculars
- Súper protecció contra:
 - Humitat
 - Suor
 - Productes químics
 - Pols



MOTLLE PER A RETROAURICULAR

- Motlle a mida
- Material dur acrílic o tou silicona
- Diversos acabats

